

Schleifkappen und Schleifkappenträger für Podologie und Fußpflege



Intelligente Werkzeuglösungen zum attraktiven Preis

In der Welt der industriellen Feinbearbeitung gelten wir als einer der international führenden Innovations- und Systempartner für komplexe Werkzeuglösungen.

Namhafte Unternehmen verschiedener Branchen schätzen unsere solide Fertigungs- und Entwicklungskompetenz.

In der Prozessentwicklung unserer Kunden fungieren wir als Berater und Ideengeber und erarbeiten im engen Dialog mit unseren Auftraggebern intelligente, leistungsstarke Werkzeuglösungen zu attraktiven Konditionen.

⊕ **deutsche Herstellerkompetenz**

⊕ **agile Produktentwicklung**

⊕ **attraktives Preis-/Leistungsverhältnis**

Unser Portfolio reicht von Werkzeugen für die Oberflächenbearbeitung und das Trennen von Werkstoffen über Schraub- und Drehmomenttechnik bis hin zu rotierenden Werkzeugen und Instrumenten – auch zum Einsatz in Podologie und Fußpflege.

⊕ **zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015**

⊕ **zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015**

Die solide Qualität unserer Werkzeuge bietet unseren Kunden größte Sicherheit und Stabilität in ihren Fertigungsprozessen.

Das gleichbleibend hohe Niveau unserer Produkte stellen wir sicher durch ein konsequent gelebtes Qualitätsmanagement im Rahmen unseres integrierten Managementsystems. Dabei legen wir gleichzeitig Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen und streben die nachhaltige Verbesserung unserer Umwelt- und Energiebilanz an.

Unsere Kundennähe ermöglicht uns eine aktive Beteiligung an der wirtschaftlichen und technologischen Weiterentwicklung der Branchen, in denen und für die wir tätig sind. Dafür engagieren wir uns aktiv in Fachverbänden.

Darüber hinaus wirken wir in Gremien der Bereiche Normung, Produkt- und Arbeitssicherheit und Umweltschutz mit.



Effiziente und hygienische Schleifkappen mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis

Schleifkappen für Podologie und Fußpflege sorgen für eine effiziente und schonende Behandlung in der Praxis. Gegenüber herkömmlichen und anderen rotierenden Instrumenten zur Hornhautentfernung bieten Podologie-Schleifkappen einige Vorteile:

⊕ maximale Hygiene dank Einmalverwendung

⊕ angenehmes Arbeiten durch geringen Anpressdruck

⊕ sichere und schonende Behandlung



Wählen Sie aus verschiedenen Formen und Körnungen – von extra grob bis fein – so erhalten Sie immer das perfekte Ergebnis für den jeweiligen Anwendungsfall.



Verwenden Sie die dazugehörigen HARDY-Schleifkappenträger – engste Toleranzen garantieren den perfekten Halt während der Behandlung und erlauben eine leichte Montage und Demontage.



»Schneller und kraftschonender arbeiten: Ich setze auf HARDY-Kappen und spare dabei sogar noch Geld.«


HARDY-Schleifkappenträger sind für alle handelsüblichen Handstücke mit Schaft 2,35 mm geeignet.

Eine Reinigung und Aufbereitung der Schleifkappenträger ist problemlos möglich – das schont Ressourcen und Budget.



Sie benötigen eine andere Schleifkappen-Farbe? – Sprechen Sie uns an!

Schleifkappen

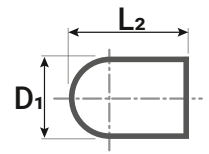

Form	Bezeichnung	D ₁ mm	L ₂ mm	Korngröße				VE*
				A60 (extra grob)	A80 (grob)	A150 (mittel)	A240 (fein)	
				Artikelnummer				
	SKA 1015	10	15	G1000483	G1000484	-	-	10 100
	SKC 0511	5	11	G1000541	G1000184	G1000212	-	10 100
	SKC 0713	7	13	G1000245	G1000266	G1000270	-	10 100
	SKC 1015	10	15	G1000279	G1000282	G1000303	G1000340	10 100
	SKC 1319	13	19	G1000380	G1000417	G1000468	G1000469	10 100
	SKC 1626	16	26	G1000470	G1000471	G1000472	G1000473	10 100
	SKG 0713	7	13	-	G1000474	G1000475	-	10 100
	SKG 1015	10	15	-	G1000476	G1000477	-	10 100
	SKG 1319	13	19	-	G1000479	G1000480	-	10 100
	SKG 1626	16	26	-	G1000481	G1000482	-	10 100

*Alle Artikel ab Lager lieferbar – verpackt zu 10 Stück im PE-Beutel oder 100 Stück im Karton.
Fragen Sie gern nach weiteren Abmessungen, Verpackungseinheiten und -formen.


**Jetzt kostenlos
anfordern!**

Testsortiment im
Durchmesser 10 mm
(Artikelnummer G1000682)

✉ info@hardy-industrie.de

☎ +49 2354 7068-300

Schleifkappenträger

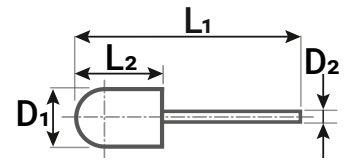


Form	Bezeichnung	D ₁ mm	L ₂ mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Artikelnummer	VE*
	GTA 1015	10	15	2,35	55	G1000493	5
	GTC 0511	5	11	2,35	51	G1000209	5
	GTC 0713	7	13	2,35	53	G1000485	5
	GTC 1015	5	10	2,35	50	G1000486	5
	GTC 1319	13	19	2,35	59	G1000487	5
	GTC 1616	16	26	2,35	66	G1000488	5
	GTG 0713	7	10	2,35	53	G1000489	5
	GTG 1015	10	15	2,35	55	G1000490	5
	GTG 1319	13	19	2,35	59	G1000491	5
	GTG 1626	16	26	2,35	66	G1000492	5

*Alle Artikel ab Lager lieferbar – verpackt zu 5 Stück im PE-Beutel.
Fragen Sie gern nach weiteren Abmessungen, Verpackungseinheiten und -formen.


Bitte beachten Sie die folgenden **Anwendungshinweise**:


Korngröße	Anwendung	Drehzahl
extra grob	» Entfernen extremer, sehr grober Hornhaut	<p>empfohlen 7.000–10.000 U/min maximal 11.000 U/min</p>
grob	» Entfernen grober Hornhaut	
mittel	» Entfernen feiner Hornhaut	
fein	» Glätten der Haut	


Kontakt



**HARDY Industriewerkzeuge
und Anlagen GmbH**
Auf der Koppel 7
58540 Meinerzhagen (Germany)

 +49 2354 7068-300

 +49 2354 7068-398

 info@hardy-industrie.de